

Formbarkeit

Oxygenierung*

Weiche Spitze



S-Guide

Formbare Intubationshilfe zum
schwierigen Atemwegsmanagement

S-Guide — 3 Vorteile in 1




Anwendungsvideo

Der S-Guide ist eine Intubationshilfe zum schwierigen Atemwegsmanagement und vereinfacht die orotracheale Intubation, vor allem bei Patienten, bei denen die Visualisierung der Glottis nicht ausreichend ist. Auf Grund seiner **Formbarkeit** eignet er sich für die direkte und indirekte Laryngoskopie und besonders für Videolaryngoskope ohne Führungskanal. Mit den O₂ Konnektoren ist eine **Oxygenierung*** während des gesamten Intubationsvorgangs möglich. Die Oxygenierung wird auch bei gebogenem S-Guide nicht beeinträchtigt. Für die Patientensicherheit hat der S-Guide eine farbige, vorgeformte und atraumatische **weiche Spitze**.

Formbarkeit

- Das besondere Design des Materials vereint:
 - Formbarkeit, um den Trachealtubus vorzuformen
 - Steifigkeit, um den Trachealtubus zu manövrieren
- Spezielle schwarze Markierung bei den Größen 11 Fr und 15 Fr zeigt die ideale Position zur Formung des Trachealtubus an (Hockeyschläger-Markierung)

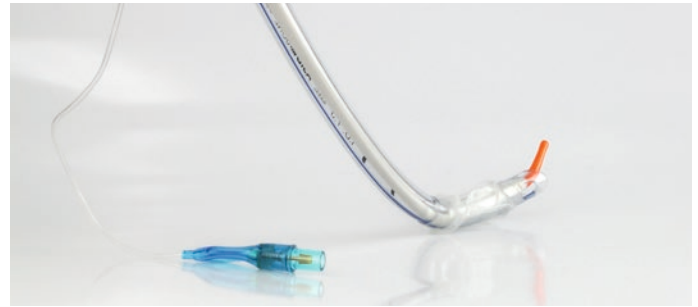

Oxygenierung*

- Für die Größen 11 Fr und 15 Fr
- Drei Öffnungen am distalen Ende des S-Guide, um einen angemessenen Sauerstofffluss zu ermöglichen
- 2 verschiedene Konnektoren:
 - O₂ - 15 mm Konnektor und O₂ Konnektor



Weiche Spitze

- Vorgeformte, weiche und atraumatische Spitze
- Farbige Spitze:
 - Zur besseren Visualisierung innerhalb der glottischen Strukturen
 - Zur Größenkodierung



*Oxygenierung ist möglich mit den Größen 11 Fr und 15 Fr. Oxygenierung ist nicht möglich mit der Größe 8 Fr.

Bestellinformation

S-Guide

Größe	Länge	Trachealtubus I.D.	REF	VE
8 Fr	40 cm	≥ 3.0 mm	33-92-400-1	5
11 Fr	65 cm	≥ 4.5 mm	33-91-650-1	5
15 Fr	65 cm	≥ 6.0 mm	33-90-650-1	5

Produktspezifikationen

- Lebensdauer 5 Jahre
- Steril verpackt
- Produkt zum Einmalgebrauch

Dieses Produkt ist hergestellt ohne die Verwendung von Naturkautschuklatex, wenn nicht anders gekennzeichnet.
Dieses Produkt enthält keine kennzeichnungspflichtigen Phthalate gemäß CLP-Verordnung (EG) Nr. 1272/2008.

VBM Medizintechnik GmbH

Einsteinstrasse 1 | 72172 Sulz a.N. | Germany

Tel.: +49 7454 9596-0 | Fax: +49 7454 9596-33 | e-mail: verkauf@vbm-medical.de | www.vbm-medical.de

Folgen Sie uns auf:



CE 0123

PRO019_2.0_DE