



# Ambu® Aura™ Larynxmaskenfamilie

Qualität aus Tradition, Sicherheit aus Innovation

# Für jede Situation

## - die richtige Larynxmaske

Die Ambu Aura Produktfamilie bietet ein komplettes Sortiment an Larynxmasken. So haben Sie für jede Anwendungssituation die passende Larynxmaske verfügbar.



### Ambu® AuraGain™

#### Einweg-Larynxmaske mit gastrischem Zugang und Intubationsmöglichkeit

Die einzige anatomisch geformte Atemwegshilfe mit integriertem gastrischem Zugang und einer Intubationsmöglichkeit.



### Ambu® AuraOnce™

#### Anatomisch geformte Einweg-Larynxmaske

Die original anatomisch geformte Maske, für optimale Platzierung und Stabilität<sup>1)</sup>.



## Phthalatfreie Produkte

### - für eine bessere Zukunft

Unsere Larynxmasken werden ohne schädliche Phthalate hergestellt, dadurch sind sie besonders sicher für Ihre Patienten. Des Weiteren sind wir stetig bemüht, unsere Herstellungsprozesse und Verpackungen zu optimieren, damit unsere Produkte noch umweltfreundlicher werden.

1) Williams DL et al., Randomised Comparison of the AMBU AuraOnce Laryngeal Mask and the LMA Unique Laryngeal Mask Airway in Spontaneously Breathing Adults. Anesthesiol Res Pract. doi: 10.1155/2012/405812  
2) Monclus E et al., Clinical and endoscopic comparison of the single use laryngeal mask (AuraOnce) with the flexible laryngeal mask (AuraFlex) in three different positions of the head, Eur J Anaesthesiol 2008;25 (suppl 44):10AP1-7



Ambu® Aura-i™

## Einweg-Larynxmaske mit Intubations- möglichkeit

Die Ambu Aura-i eignet sich hervorragend für die tägliche Praxis.  
Dank der integrierten Intubationsmöglichkeit kann durch die Aura-i  
problemlos intubiert werden.



Ambu® AuraFlex™

## Flexible Einweg-Larynxmaske

Für eine schnelle und einfache Einführung ohne das Operationsfeld  
einzuschränken<sup>2)</sup>.





## **Innovative anatomische Form** ermöglicht eine schnelle und einfache Platzierung

Bereits mehrere Millionen Anwender sind von der einfachen Anwendung unserer Larynxmasken überzeugt. In den letzten 10 Jahren hatten wir die Möglichkeit unsere Larynxmasken stetig weiterzuentwickeln, um mit immer neuen Innovationen Ihren Alltag zu verbessern.



## **Durchdacht bis ins Detail** um hohen Anwendungskomfort zu bieten

Alle Aura Larynxmasken sind farbkodiert verpackt, so ist eine schnelle Wahl der richtigen Maske möglich. Zur weiteren Identifikation ist auf dem Pilotballon nochmals die Maskengröße aufgedruckt. Die auf dem Tubus angebrachten Markierungslinien ermöglichen eine ständige Lagekontrolle.



# Ambu® AuraOnce™

- getestet, bewährt, zuverlässig

Bereits seit über 10 Jahren stehen Ambu Aura Larynxmasken für Qualität und Innovation. Die Ambu AuraOnce ist eine Einweg-Larynxmaske für die Routineanwendung in der Anästhesie.



## Verstärkte Cuffspitze bietet Patientensicherheit

Die verstärkte Cuffspitze verhindert das Umklappen der Spitze während der Platzierung und dichtet den oberen Ösophagussphinkter optimal ab. Moderne Fertigungstechniken ermöglichen, dass der Cuff und der Tubus aus einem Stück geformt sind und somit extra Sicherheit bieten.




## Extra dünner, weicher Cuff für optimale Abdichtung

Besonders dünner, weicher Cuff für eine bestmögliche Abdichtung bei minimalem Cuffdruck. Der Tubus ist in der Nähe des Cuffs weich und gewebeschonend, während er im oberen Abschnitt fest genug ist, um eine sichere und kontrollierte Positionierung zu ermöglichen.

# Ambu® AuraGain™

## - Eine neue Generation für Patientensicherheit und Effizienz

Die AuraGain ist die einzige anatomisch geformte Larynxmaske mit integriertem gastrischen Zugang und Intubationsmöglichkeit. Heben sie Patientensicherheit und Effizienz auf ein neues Level.

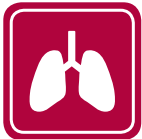

### Vereinfachtes Atemwegsmanagement

Die Ambu AuraGain ermöglicht die direkte Intubation eines erwartet oder unerwartet schwierigen Atemwegs.



#### Wenn Patientensicherheit eine Notwendigkeit ist

Im Fall einer „Cannot Intubate-Cannot Ventilate“ (CI-CV) Situation, in der die Intubation des Patienten notwendig ist, kann die Ambu AuraGain bei einer direkten endotrachealen Intubation als Einführhilfe verwendet werden.



### Optimale Atemwegssicherung

Dank der anatomischen Form gewährleistet die Ambu AuraGain eine schnelle und korrekte Platzierung und einen hohen Abdichtungsdruck.



#### Schnelle Platzierung

Die innovative, anatomische Form entspricht der Anatomie der menschlichen Atemwege. Dies ermöglicht eine schnelle Platzierung und eine langfristige Funktionalität. Die AuraGain ist somit die richtige Wahl für geübte und auch ungeübte Anwender.



Nachgewiesener  
Abdichtungsdruck  
von bis zu  
**40 cm H<sub>2</sub>O\***



## Einfacher Zugang

Die Ambu AuraGain gehört der zweiten Generation von Atemwegshilfen an. Durch den gastrischen Zugang ist eine Absaugung und Dekompression des Magens problemlos möglich.



### Reibungsarmer integrierter gastrischer Zugang für eine einfache Platzierung

Dank der reibungsarmen Oberfläche des gastrischen Zugangs, können Magensonden einfach platziert werden. Durch die Magensonde ist eine aktive und passive Kontrolle des Mageninhalts möglich.



## Vielseitig Einsetzbar

Dank ihrer Vielseitigkeit ist die Ambu AuraGain eine sichere Wahl für Routine als auch für anspruchsvollere Eingriffe.



### Sie haben die Wahl

Mit der AuraGain beginnt eine neue Generation für Patientensicherheit und Effizienz. Hoher Abdichtungsdruck, eine Intubationsmöglichkeit und ein gastrischer Zugang sind in einer Maske integriert. So ist die AuraGain perfekt für Routine und anspruchsvollere Eingriffe geeignet. Zusätzlich wird die Notwendigkeit von Spezialausrüstung reduziert.

# Ambu® AuraFlex™

- einfach, sicher, flexibel

Flexible Einweg-Larynxmaske, die speziell für Operationen in folgenden Bereichen: HNO, Augenheilkunde, Zahnmedizin sowie Operationen im Kopf und Halsbereich, geeignet ist.



## Hohe Flexibilität

ermöglicht eine Anpassung an das wechselnde Operationsfeld

Die hohe Flexibilität des verstärkten Tubus ermöglicht eine einfache Positionierung außerhalb des Operationsfeldes, ohne die Dichtigkeit der Maske zu beeinflussen. Der knickfreie, spiralverstärkte Tubus verringert das Risiko einer Atemwegsokklusion.



## Integrierte Cufffülleitung

bietet Sicherheit während der Operation

Die im Tubus integrierte Cufffülleitung erleichtert die Arbeit des Operateurs und reduziert das Risiko die Leitung während der Operation zu beschädigen.



# Ambu® Aura-i™

- einfach, sicher, intubierbar

Die Ambu Aura-i ist eine Einweg-Intubationslarynxmaske für die tägliche Praxis. So bietet die Larynxmaske noch eine zusätzliche Back-up Lösung.



## Bewährte Qualität für zuverlässigen Einsatz

Die Ambu Aura-i Larynxmaske besitzt die bewährte innovative, anatomische Form welche eine gewohnte schnelle und einfache Positionierung ermöglicht. Verstärkte Cuffspitze verhindert das Umklappen der Spitze während der Platzierung und dichtet den oberen Ösophagussphinkter ab.



## Intubationsmöglichkeit bietet Sicherheit für die tägliche Praxis

In einer "Cannot intubate - cannot mask ventilate" Situation (Unmögliche Intubation - unmögliche Maskenbeatmung), kann durch die Aura-i mit Hilfe eines flexiblen Endoskops (z.B. dem Ambu aScope™) unter Sicht intubiert werden. Der Tubus der Aura-i ist vom Innendurchmesser so ausgelegt, dass ein Endotrachealtubus von geeigneter Größe durch den Tubus der Larynxmaske geschoben werden kann. Die geeignete Endotrachealtubusgröße ist auf dem Konnektor der Aura-i abgebildet.



# Bestellinformationen



## Ambu® AuraOnce™

- Die innovative, anatomische Form ermöglicht eine schnelle und einfache Platzierung
- Cuff und Tubus sind aus einem Stück geformt, dies bietet extra Sicherheit, da eine Abtrennung nicht möglich ist
- Verstärkte Cuffspitze verhindert das Umklappen der Spitze während der Platzierung und dichtet den oberen Ösophagussphinkter ab



## Ambu® AuraOnce™

| Artikelnummer | Größe | Typ                | Versandereinheit* | Umverpackung |
|---------------|-------|--------------------|-------------------|--------------|
| 321 100 000   | 1     | Einweg-Larynxmaske | 10                | 120          |
| 321 150 000   | 1 ½   | Einweg-Larynxmaske | 10                | 120          |
| 321 200 000   | 2     | Einweg-Larynxmaske | 10                | 100          |
| 321 250 000   | 2 ½   | Einweg-Larynxmaske | 10                | 100          |
| 321 300 000   | 3     | Einweg-Larynxmaske | 10                | 80           |
| 321 400 000   | 4     | Einweg-Larynxmaske | 10                | 80           |
| 321 500 000   | 5     | Einweg-Larynxmaske | 10                | 60           |
| 321 600 000   | 6     | Einweg-Larynxmaske | 10                | 60           |



## Ambu® AuraGain™

- Integrierter gastrischer Zugang zur Kontrolle des Mageninhalts
- In Verbindung mit Standard-Endotrachealtuben zur Intubation geeignet
- Die innovative, anatomische Form ermöglicht eine schnelle Platzierung



## Ambu® AuraGain™

| Artikelnummer | Größe | Typ                                                                         | Versandereinheit* | Umverpackung |
|---------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|
| 408 100 000   | 1     | Einweg-Speziallarynxmaske mit gastrischem Zugang und Intubationsmöglichkeit | 10                | 120          |
| 408 150 000   | 1 ½   | Einweg-Speziallarynxmaske mit gastrischem Zugang und Intubationsmöglichkeit | 10                | 120          |
| 408 200 000   | 2     | Einweg-Speziallarynxmaske mit gastrischem Zugang und Intubationsmöglichkeit | 10                | 100          |
| 408 250 000   | 2 ½   | Einweg-Speziallarynxmaske mit gastrischem Zugang und Intubationsmöglichkeit | 10                | 100          |
| 408 300 000   | 3     | Einweg-Speziallarynxmaske mit gastrischem Zugang und Intubationsmöglichkeit | 10                | 80           |
| 408 400 000   | 4     | Einweg-Speziallarynxmaske mit gastrischem Zugang und Intubationsmöglichkeit | 10                | 80           |
| 408 500 000   | 5     | Einweg-Speziallarynxmaske mit gastrischem Zugang und Intubationsmöglichkeit | 10                | 60           |
| 408 600 000   | 6     | Einweg-Speziallarynxmaske mit gastrischem Zugang und Intubationsmöglichkeit | 10                | 60           |



## Ambu® Aura-i™

- In Verbindung mit Standard-Endotrachealtuben zur Intubation geeignet
- Die innovative, anatomische Form ermöglicht eine schnelle Platzierung
- Beißschutz am Konnektorblock verhindert Okklusionen



## Ambu® Aura-i™

| Artikelnummer | Größe | Typ                           | Versandeinheit* | Umverpackung |
|---------------|-------|-------------------------------|-----------------|--------------|
| 329 100 000   | 1     | Einweg-Intubationslarynxmaske | 10              | 120          |
| 329 150 000   | 1 ½   | Einweg-Intubationslarynxmaske | 10              | 120          |
| 329 200 000   | 2     | Einweg-Intubationslarynxmaske | 10              | 100          |
| 329 250 000   | 2 ½   | Einweg-Intubationslarynxmaske | 10              | 100          |
| 329 300 000   | 3     | Einweg-Intubationslarynxmaske | 10              | 80           |
| 329 400 000   | 4     | Einweg-Intubationslarynxmaske | 10              | 80           |
| 329 500 000   | 5     | Einweg-Intubationslarynxmaske | 10              | 60           |
| 329 600 000   | 6     | Einweg-Intubationslarynxmaske | 10              | 60           |



## Ambu® AuraFlex™

- Die hohe Flexibilität des spiralverstärkten Tubus ermöglicht eine einfache Positionierung außerhalb des Operationsfeldes, ohne die Dichtigkeit der Maske zu beeinflussen
- Knickfreier, spiralverstärkter Tubus verringert das Risiko von Atemwegsokklusionen
- Die im Tubus integrierte Cuffüllleitung erleichtert die Arbeit des Operators und reduziert das Risiko die Leitung während der Operation zu beschädigen



## Ambu® AuraFlex™

| Artikelnummer | Größe | Typ                         | Versandeinheit* | Umverpackung |
|---------------|-------|-----------------------------|-----------------|--------------|
| 327 200 000   | 2     | Flexible Einweg-Larynxmaske | 10              | 120          |
| 327 250 000   | 2 ½   | Flexible Einweg-Larynxmaske | 10              | 120          |
| 327 300 000   | 3     | Flexible Einweg-Larynxmaske | 10              | 120          |
| 327 400 000   | 4     | Flexible Einweg-Larynxmaske | 10              | 100          |
| 327 500 000   | 5     | Flexible Einweg-Larynxmaske | 10              | 80           |
| 327 600 000   | 6     | Flexible Einweg-Larynxmaske | 10              | 80           |

\* kleinste Versandeinheit (Einweg-Larynxmaske einzeln steril verpackt)