

# Ambu® AuraFlex



## Die wichtigsten Vorteile

- Die hohe Flexibilität des spiralverstärkten Tubus ermöglicht eine einfache Positionierung außerhalb des Operationsfeldes, ohne die Dichtigkeit der Maske zu beeinflussen
- Die im Tubus integrierte Cufffülleitung erleichtert die Arbeit des Operators und reduziert das Risiko die Leitung während der Operation zu beschädigen
- Knickfreier, spiralverstärkter Tubus verringert das Risiko von Atemwegsokklusionen
- Das komplette Größenportfolio von Größe 2 bis 6 ist für die meisten Anwendungen geeignet
- Dünner und weicher Cuff mit Easy-Glide-Oberfläche für einfache Positionierung und Entfernung
- Verstärkte Cuffspitze reduziert das Umklappen der Spitze während der Platzierung - Einfache, schnelle und korrekte Positionierung
- Gut sichtbare Markierungslinien am Tubus zur Lagekontrolle
- Steril verpackt und sofort einsatzbereit
- Farbkodierte Verpackung mit Bedienungsanleitung
- Phthalatfreies Material

## Ambu® AuraFlex

Die Ambu AuraFlex ist eine flexible Einweg-Larynxmaske, die speziell für Operationen in folgenden Bereichen: HNO, Augenheilkunde, Zahnmedizin sowie Operationen im Kopf- und Halsbereich geeignet ist.


Die AuraFlex hat einen langen, spiralverstärkten Tubus der eine Positionierung außerhalb des Operationsfeldes ohne Dichtigkeitsverlust erlaubt. Der knickfreie, drahtverstärkte Tubus verringert das Risiko einer Atemwegsokklusion.

Die integrierte Cufffülleitung vereinfacht die Handhabung und die Positionierung Larynxmaske und minimiert somit die Gefahr die Cufffülleitung während der Operation zu beschädigen.

Die AuraFlex ist in den Größen 2 - 6 erhältlich.

## Technische Daten

|                              | Kinder                                                                            |                                                                                   | Erwachsene                                                                        |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Maskengröße                  | # 2                                                                               | # 2 ½                                                                             | # 3                                                                               | # 4                                                                               | # 5                                                                               | # 6                                                                                |
| Farbkodierung der Verpackung |  |  |  |  |  |  |
| Patientengewicht             | 10 - 20 kg                                                                        | 20 - 30 kg                                                                        | 30 - 50 kg                                                                        | 50 - 70 kg                                                                        | 70 - 100 kg                                                                       | > 100 kg                                                                           |
| Maximales Cuffvolumen        | 10 ml                                                                             | 14 ml                                                                             | 20 ml                                                                             | 30 ml                                                                             | 40 ml                                                                             | 50 ml                                                                              |
| Maximaler Cuffinnendruck     | 60 cm H <sub>2</sub> O                                                            |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
| Universalkonnektor           | 15 mm männlich DIN EN ISO 5356-1                                                  |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
| Min. I. D.                   | 6 mm                                                                              | 6 mm                                                                              | 7,5 mm                                                                            | 7,5 mm                                                                            | 8,5 mm                                                                            | 8,5 mm                                                                             |
| Max. A. D.                   | 9,7 mm                                                                            | 9,7 mm                                                                            | 11,5 mm                                                                           | 11,5 mm                                                                           | 12,5 mm                                                                           | 12,5 mm                                                                            |
| Ventil                       | Luer Konus ISO 594-1 (DIN 20594-1)                                                |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
| Gewicht                      | 19,5 g                                                                            | 23,1 g                                                                            | 31,0 g                                                                            | 35,2 g                                                                            | 46,3 g                                                                            | 54,4 g                                                                             |
| Tubusvolumen                 | 8,5 ml                                                                            | 8,5 ml                                                                            | 14 ml                                                                             | 14 ml                                                                             | 19 ml                                                                             | 19,5 ml                                                                            |
| Druckverlust                 | < 0,2 cm H <sub>2</sub> O bei 30 l/min                                            | < 0,2 cm H <sub>2</sub> O bei 30 l/min                                            | < 0,3 cm H <sub>2</sub> O bei 60 l/min                                            | < 0,3 cm H <sub>2</sub> O bei 60 l/min                                            | < 0,2 cm H <sub>2</sub> O bei 60 l/min                                            | < 0,2 cm H <sub>2</sub> O bei 60 l/min                                             |
| Interdental Abstand          | 19 mm                                                                             | 22 mm                                                                             | 23 mm                                                                             | 27 mm                                                                             | 30 mm                                                                             | 33 mm                                                                              |
| Tubuslänge                   | 22 cm                                                                             | 22 cm                                                                             | 24,5 cm                                                                           | 24,5 cm                                                                           | 26,5 cm                                                                           | 27 cm                                                                              |
| <b>Spezielle Anwendung</b>   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
| Max. FOB Größe               | 3,0 mm                                                                            | 3,0 mm                                                                            | 3,5 mm                                                                            | 3,5 mm                                                                            | 4,0 mm                                                                            | 4,0 mm                                                                             |

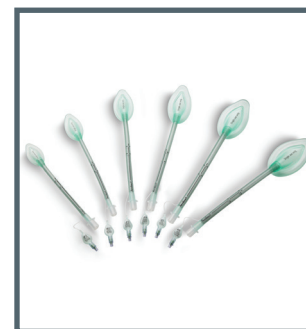

AuraFlex Größenübersicht



AuraFlex Cuff

## Materialien

| Produkt        | Phthalatfrei | Material      |
|----------------|--------------|---------------|
| Tubus          | Ja           | PVC/Edelstahl |
| Cuff           | Ja           | PVC           |
| Cufffülleitung | Ja           | PVC           |
| Cufffüllventil | Ja           | PC/Silikon/PP |
| Tubuskonnektor | Ja           | PCTG          |

Die Ambu AuraFlex ist Latexfrei.

| Verpackung       |  |            |
|------------------|--|------------|
| Einzelverpackung |  | Tyvek/HDPE |
| Umverpackung     |  | Karton     |



AuraFlex mit Cuffprotector

## Bestellinformationen

| Artikelnummer | Größe | Typ                         | Versandereinheit* | Umverpackung |
|---------------|-------|-----------------------------|-------------------|--------------|
| 327 200 000   | 2     | Flexible Einweg-Larynxmaske | 10                | 120          |
| 327 250 000   | 2 ½   | Flexible Einweg-Larynxmaske | 10                | 120          |
| 327 300 000   | 3     | Flexible Einweg-Larynxmaske | 10                | 120          |
| 327 400 000   | 4     | Flexible Einweg-Larynxmaske | 10                | 100          |
| 327 500 000   | 5     | Flexible Einweg-Larynxmaske | 10                | 80           |
| 327 600 000   | 6     | Flexible Einweg-Larynxmaske | 10                | 80           |

\*kleinste Versandereinheit (Einweg-Larynxmaske einzeln steril verpackt)



Farbkodierte Verpackung mit Bedienungsanleitung

**Ambu A/S**  
 Baltorpbakken 13  
 2750 Ballerup  
 Denmark  
 Tel. +45 72 25 20 00  
 Fax +45 72 25 20 50  
 www.ambu.com

**Ambu GmbH**  
 In der Hub 5  
 61231 Bad Nauheim  
 Deutschland  
 Tel. 06032 9250-0  
 Fax 06032 9250-200  
 www.ambu.de

