



LARYNGOSKOPE
Präzision bis ins Detail



UMFASSENDE LÖSUNGEN FÜR ALLE INTUBATIONEN

Verlässliche Marken machen Teleflex zu Ihrem starken und vertrauenswürdigen Partner. Mit einer soliden Tradition kontinuierlicher Innovation ist Teleflex ein weltweit führender Anbieter hochwertiger Medizinprodukte, die eigens entwickelt wurden um Sie darin zu unterstützen, Risiken zu minimieren und Behandlungsergebnisse für Ihre Patienten zu maximieren. Und da wir wissen, wie wichtig eine umfassende Palette einander ergänzender Produkte für unsere Kunden ist, haben wir ein einzigartiges Produktportfolio für Sie entwickelt.

Mit der von uns aktuell gebotenen Bandbreite an Laryngoskop-systemen können Sie sicher sein, stets die beste Wahl zu haben, wenn es darum geht, der individuellen Verfassung und anatomischen Gegebenheit, der Situation oder dem Umfeld des Patienten gerecht zu werden.

Denn wir, Teleflex, haben den Anspruch, Ihnen immer dasjenige System zur Verfügung stellen zu können, das Ihre Anforderungen am besten erfüllt.


Dank rÜSCH bieten wir Ihnen einen Qualitätsstandard und eine Entwicklungskompetenz, die weltweit ihresgleichen sucht. Unsere Produktpalette enthält erstklassige Laryngoskope der Marke rÜSCH in verschiedenen Ausführungen und Größen und auch für die schwierige Intubation. Wiederverwendbare Laryngoskope und Laryngoskope für den Einmalgebrauch, sowie eine Reihe von fiberoptischen Kaltlicht- und konventionellen Warmlichtsystemen gehören ebenfalls zu unserem Angebot.

Weitere Details und technische Spezifikationen zu unseren Produkten finden Sie in dieser Broschüre.

**TELEFLEX – QUALITATIV HOCHWERTIGE
MEDIZINISCHE PRODUKTE – ALLES AUS EINER HAND**



*Unsere Laryngoskope –
das perfekte Instrumentarium
für alle Intubationen.*

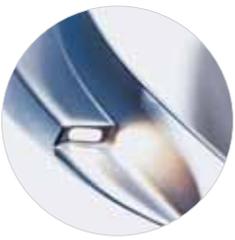

EINLEITUNG	2
SPATEL.....	4
X-LITE Spatel	4
Safeview Spatel.....	5
FOCS PRO Set.....	5
LED HANDGRIFFE	6
X-Lite Handgriffe.....	6
Handgriffe aus Metall	7
Handgriff aus Kunststoff	7

SPATEL

X-LITE SPATEL

X-LITE SPATEL				<i>RÜSCH</i>
	ART. NR.	BESTELLGRÖSSE	BESCHREIBUNG	VE
	670000	0/1/2/3/4/5	<ul style="list-style-type: none"> nach Macintosh 	1
	670060	0/1/2/3/4	<ul style="list-style-type: none"> nach Miller 	1
	670050	0/1/2/3/4	<ul style="list-style-type: none"> nach Foregger 	1
	670015	1/2/3/4	<ul style="list-style-type: none"> Take-a-part nach Macintosh mit austauschbarem Lichtträger 	1
	670016	1/2/3/4	<ul style="list-style-type: none"> Take-a-part Ersatzlichtträger 	1
	670001	klein/mittel/groß	<ul style="list-style-type: none"> Kinder 	1
	670166	2/3/4	<ul style="list-style-type: none"> nach Macintosh steril zum Einmalgebrauch 	10
	670167	2/3/4	<ul style="list-style-type: none"> nach Macintosh zum Einmalgebrauch 	20
	670166	0/1	<ul style="list-style-type: none"> nach Miller steril zum Einmalgebrauch 	10
	670167	0/1	<ul style="list-style-type: none"> nach Miller zum Einmalgebrauch 	20

SAFEVIEW® SPATEL MIT SCHUTZHÜLLE

EINFACH, EFFIZIENT, SICHER – ALLES IN EINEM

Der Spatel ist sehr starr. Das optimierte Profil und die guten Gleiteigenschaften erleichtern das Einführen. Die hohe Leuchtkraft bietet eine optimale Sicht. Jeder Safeview Spatel befindet sich bereits in einer individuellen Schutzhülle, die die Kontaminationsgefahr für Patient und Personal senkt. Sie schützt den Handgriff während und nach der Intubation vor Kontakt mit Sekret oder Blut. Safeview Spatel sind auch im Notfall einfach und schnell einsetzbar. Wenn es auf Sekunden ankommt, können Sie mit Safeview rechnen.



SAFEVIEW EINMALSPATEL MIT SCHUTZHÜLLE

RUSCH

	ART. NR.	BESTELLGRÖSSE	BESCHREIBUNG	VE
	670504	1/2/3/4	<ul style="list-style-type: none"> • nach Macintosh • Kunststoff • Kaltlicht • zum Einmalgebrauch 	10/10/20/20
	670505	0/1/2	<ul style="list-style-type: none"> • nach Miller • Kunststoff • Kaltlicht • zum Einmalgebrauch 	10
	670150	0/1/2/3/4	<ul style="list-style-type: none"> • nach Macintosh • Metall • Kaltlicht • zum Einmalgebrauch 	10
	670185	00/0/1/2/3/4	<ul style="list-style-type: none"> • nach Miller • Metall • Kaltlicht • zum Einmalgebrauch 	10

FOCS PRO SET

KALTLICHT-LARYNGOSKOP MIT BEWEGLICHER SPATELSPITZE

Bei anatomisch schwierigen Verhältnissen kommt die bewegliche Spatelspitze zum Einsatz. Der Macintosh-Spatel in der Größe 3,5 deckt den größten Bereich bei fast allen Patienten ab. Durch die einzigartige Federkonstruktion lässt sich die Spatelspitze stufenlos bewegen.

FOCS PRO LARYNGOSKOP SET

ART. NR.	BESCHREIBUNG	VE
670165	<ul style="list-style-type: none"> • Macintosh-Spatel Größe 3,5 • Dolphin-Handgriff • Ersatzlämpchen 	1



LED HANDGRIFFE

X-LITE HANDGRIFFE

LED-Lichtquelle:

- Hochleistungs-LED >50.000 Lux
- schnell einsatzbereit, wartungsfrei
- weißes Licht mit 5.500 K
- Betriebszeit: 2 Stunden bei maximaler Lichtstärke
- LED-Lebensdauer: > 50.000 Stunden

① Lithium-Ionen-Akku-Einsatz

② Batterie-Container

③ Handgriff

④ Induktiv-Ladegerät



X-LITE HANDGRIFFE, HÜLSE

RÜSCH

ART. NR.	BESTELLGRÖSSE	BESCHREIBUNG	VE
670006	klein/groß	Handgriff-Hülse	1

X-LITE HANDGRIFFE, EINSÄTZE

670057	groß	Lithium-Ionen-Akku-Einsatz für Handgriff-Hülse (mit Deckel und LED-Lampe) <ul style="list-style-type: none"> • minimale Selbstentladung • kein Memory-Effekt 	1
670049	klein/groß	Batterie-Container für Handgriff-Hülse (mit Batterie, Deckel und Xenon-Lampe)	1

X-LITE ERSATZTEILE

670011	-	Xenon-Lampe	6
670007	klein/groß	Deckel für Handgriff-Hülse	1
670008	klein/groß	Batterie-Container (ohne Lampe und ohne Batterie)	1
670053	-	Schaltbuchse für Handgriff	5

X-LITE ZUBEHÖR

670019	-	Induktionsladegerät mit automatischer Abschaltfunktion: <ul style="list-style-type: none"> • lädt bis zu zwei Akkus parallel auf • dank Induktionsladung müssen keine Kontakte gepflegt oder gereinigt werden; korrosionsbedingte Ladestörungen sind somit ausgeschlossen • Handgriffe lassen sich auch im verpackten Zustand aufladen • automatische Abschaltfunktion reduziert die Gefahr einer Überladung 	1
--------	---	--	---

HANDGRIFF AUS METALL

BATTERIEBETRIEBEN

LED-Lichtquelle

- Leuchtkraft der LED-Lampe > 9.000 Lux
- LED-Lebensdauer: > 10.000 Stunden

Energiequelle

- Ausführung für Kinder: zwei 1,5 V Alkaline Batterien (AA)
- Ausführung für Erwachsene: zwei 1,5 V Alkaline Batterien (C)
- Ausführung für adipöse Patienten: eine 3,0 V Lithium-Ionen-Batterie



FIBEROPTISCHER LARYNGOSKOP-GRIFF AUS METALL – WIEDERVERWENDBAR

RÜSCH

ART. NR.	BESTELLGRÖSSE	BESCHREIBUNG	VE
670067-000010	Kinder (schmal)	LED-Handgriff ohne Batterie	1
670067-000020	Erwachsene (normal)	LED-Handgriff ohne Batterie	1
670067-000030	adipöse Patienten (kurz)	LED-Handgriff ohne Batterie	1

HANDGRIFF AUS KUNSTSTOFF

BATTERIEBETRIEBEN

LED-Lichtquelle

- Hochleistungs-LED mit einer Leuchtkraft von 19.000 Lux an der Spatelspitze
- schnell einsatzbereit, wartungsfrei
- LED-Lebensdauer: > 1.000 Stunden

Lithium-Ionen-Batterie, nicht wieder aufladbar

- 4 Stunden Betriebsdauer bei maximaler Lichtstärke
- ohne Memory-Effekt
- Selbstentladungsrate: < 1% pro Jahr



FIBEROPTISCHER LARYNGOSKOP-GRIFF AUS KUNSTSTOFF

RÜSCH

ART. NR.	BESTELLGRÖSSE	BESCHREIBUNG	VE
670065-000010	Erwachsene	Handgriff	1
670065-000100	-	Ersatzhülse inklusive LED Glühbirne & Batterie	1