


Shiley™ oraler/nasaler Endotrachealtubus mit mittelgroßem Cuff

Für pädiatrische und erwachsene Patienten.

Der Shiley™ oral/nasale Endotrachealtubus mit mittelgroßem Cuff eignet sich für pädiatrische und erwachsene Patienten.

- Die Größenoptionen 5,0-10,0 mm verfügen über einen mittelgroßen, hochvolumigen Niederdruck-Cuff.
- Die Größen 3,0-4,5 mm sind mit einem flachen mittelgroßen Cuff ausgestattet, der die besonderen Bedürfnisse pädiatrischer Patienten berücksichtigt.


Im Vergleich zur Vorgängerversion besteht dieses Produkt aus DEHP-freiem Material, das bei Körpertemperatur weicher wird und sich den Atemwegen anpasst.

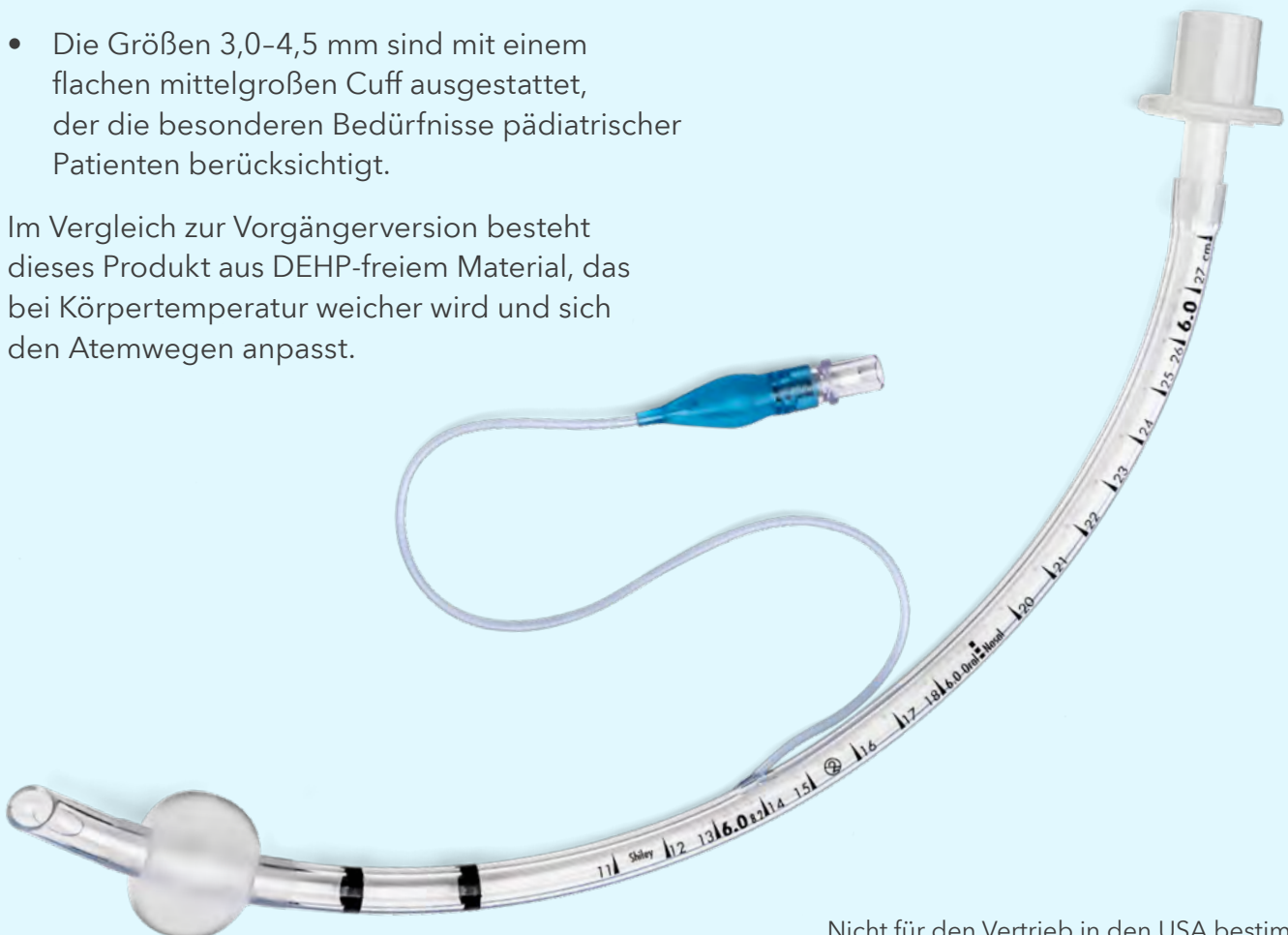

Nicht für den Vertrieb in den USA bestimmt.

Merkmale und Vorteile

Größen 5,0-10,0

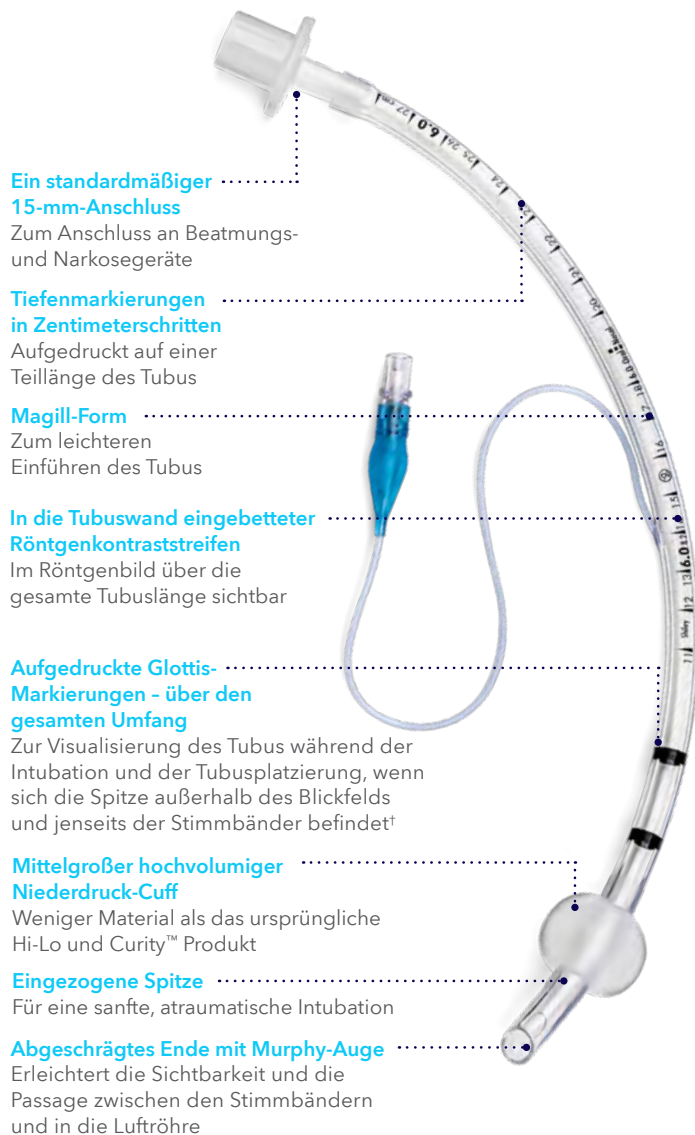

Ein standardmäßiger 15-mm-Anschluss

Zum Anschluss an Beatmungs- und Narkosegeräte

Tiefenmarkierungen in Zentimeterschritten

Aufgedruckt auf einer Teillänge des Tubus

Magill-Form

Zum leichteren Einführen des Tubus

In die Tubuswand eingebetteter Röntgenkontraststreifen

Im Röntgenbild über die gesamte Tubuslänge sichtbar

Aufgedruckte Glottis-Markierungen – über den gesamten Umfang

Zur Visualisierung des Tubus während der Intubation und der Tubusplatzierung, wenn sich die Spitze außerhalb des Blickfelds und jenseits der Stimmbänder befindet†

Mittelgroßer hochvolumiger Niederdruck-Cuff

Weniger Material als das ursprüngliche Hi-Lo und Curity™ Produkt

Eingezogene Spitze

Für eine sanfte, atraumatische Intubation

Abgeschrägtes Ende mit Murphy-Auge

Erleichtert die Sichtbarkeit und die Passage zwischen den Stimmbändern und in die Luftröhre


Größen 3,0-4,5

Aufgedruckte Glottis-Markierungen – 180°

Mittelgroßer flacher Cuff

Länglicher flacher Cuff für die Pädiatrie

Gerade Spitze mit Murphy-Auge

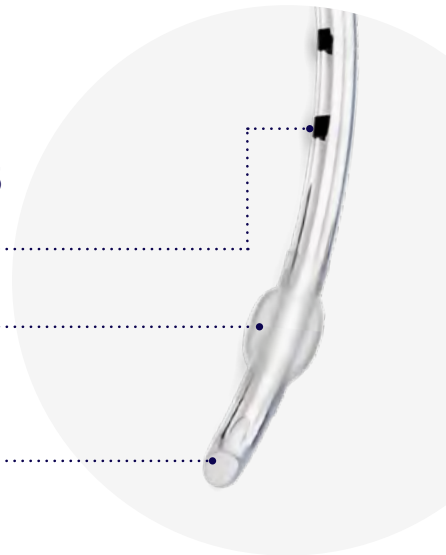

Bestellinformationen

Bestell-Nr.	Innen-Ø (mm)	Außen-Ø (mm)	Länge (mm)	Cuff-Ø (mm)
87430	3,0	4,4	160	7,8
87435	3,5	5,0	180	9,6
87440	4,0	5,7	200	9,6
87445	4,5	6,3	220	13,0
87450	5,0	6,9	240	20,9
87455	5,5	7,5	270	21,8
87460	6,0	8,2	280	23,9
87465	6,5	8,9	290	24,7
87470	7,0	9,5	300	28,2
87475	7,5	10,2	310	28,7
87480	8,0	10,8	320	32,3
87485	8,5	11,4	330	32,9
87490	9,0	12,1	335	34,0
87495	9,5	12,8	335	35,1
87410	10,0	13,5	335	35,2

Kartonmenge: 10 Stück. Alle Tuben werden steril verpackt geliefert und sind nur zum einmaligen Gebrauch bestimmt.

† Wie in ISO 5361:2016 angegeben.



Scannen Sie den QR-Code, um mehr zu erfahren. Oder wenden Sie sich an Ihren zuständigen Medtronic Mitarbeiter.

Medtronic

Wichtig: Vollständige Anweisungen, Kontraindikationen, Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen entnehmen Sie bitte der Packungsbeilage.

© 2023 Medtronic. Medtronic, das Medtronic-Logo und "Engineering the extraordinary" sind Warenzeichen von Medtronic.

™ Marken Dritter sind Warenzeichen ihrer jeweiligen Eigentümer. Alle anderen Marken sind Warenzeichen eines Medtronic-Unternehmens.

EMEA-RE-2200072-shiley-intermediate-cuff-ett-glaze-info-sheet-de-we-7773830 | 12/2023

medtronic.co.uk/pmri